

**Z**  
lipo



**body contouring**

feel the difference

body contouring



25:50

Zimmer  
MEDICAL SYSTEMS


# Notre expérience pour votre succès



## **Zimmer MedizinSysteme: Compétence cryogenic, fabriqué en Allemagne**

Avec plus de 45 ans d'expérience, Zimmer MedizinSysteme à Neu-Ulm est un leader mondial dans les applications de réfrigération médicale.

L'expérience de plus de 45 000 appareils à air froid Cryo 5 et Cryo 6 fabriqués et d'appareils de thérapie corporelle intégrale en chambre froide à  $-110^{\circ}\text{C}$  peut se retrouver dans le nouveau système Cryolipolysis™ ZLipo de Zimmer MedizinSysteme.

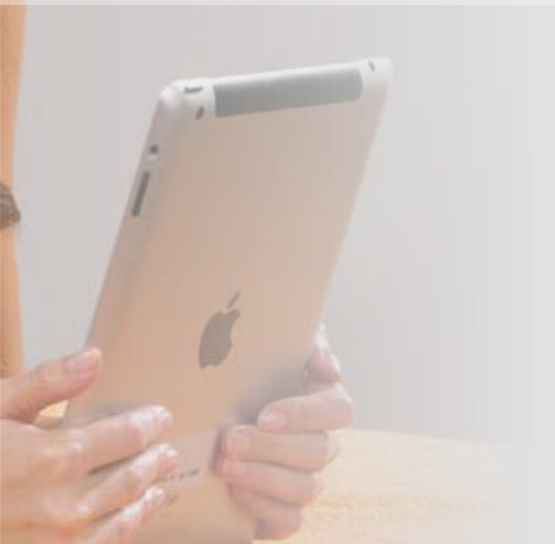



# Le froid pour gommer les poignées d'amour



## Les dernières technologies

Avec le Cryolipolysis™ -System *Z Lipo* très innovant, les dépôts de graisse ciblés sont réduits de manière permanente et non invasive.

Dans ce procédé, les dépôts de graisse sont refroidis pendant une période plus longue dans une plage de température contrôlée et sûre.

Des études ont montré que le résultat de la combinaison avec le dispositif à ondes de choc *Z Wave Pro* de Zimmer MedizinSysteme est amélioré.

## *Z Lipo* - Efficace et facile

*Z Lipo* convainc grâce à sa manipulation simple, sûre et conviviale.

Grâce à ses différents applicateurs, toutes les zones du corps en question sont traitées de façon optimale. Les protocoles de traitement individuels permettent à l'utilisateur de s'ajuster aux besoins de chaque patient.



## Z Lipo - Les phases de traitement

Z Lipo a été développé en exploitant la toute dernière expérience de recherche et promet une application nettement plus efficace dans la réduction de la graisse par le froid.


### 1. Démarrez le Cryolipolysis™

La tête d'application est placée sur la zone de traitement et la zone de réfrigération.




### 2. Réaction immédiate

Les cellules adipeuses dans la zone traitée répondent aux effets du froid.

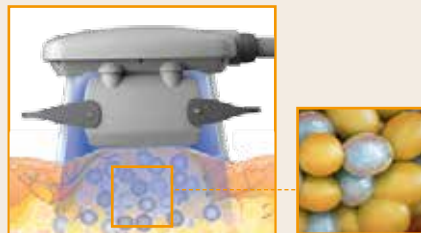


### 3. Dégradation des cellules graisseuses

Après le traitement, les cellules graisseuses se dégradent naturellement.

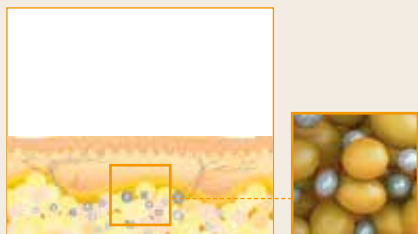

### 4. Résultat

Le résultat final est visible après environ 8 à 12 semaines.

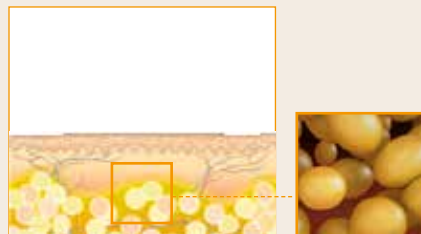

## Flexible et sécurisé - le garant pour les patients satisfaits

Trois tailles d'applicateurs sont disponibles Z Lipo - Le système est reconnu comme indolore sur la zone de traitement souhaitée. Grâce au contrôle précis des pièces à main, la zone de traitement est refroidie à la température souhaitée.

La précision de la température sélectionnée est un élément principal pour le succès et la sécurité du traitement.

En étant capable d'ajuster un vide pulsé, même pendant le traitement de la lymphe, le métabolisme est influencé positivement. L'intensité est réglable sur 10 niveaux, au cours du traitement.

## Cryolipolysis™ - Le fonctionnement

Dans ce qu'on appelle Cryolipolysis™, les dépôts de graisse sont ciblés et contrôlés pendant une période prolongée (habituellement 60 minutes) et refroidis.

L'élimination ciblée des cellules graisseuses est provoquée par une exposition au froid pendant le traitement. Cela conduit finalement à la destruction des cellules graisseuses. La réduction et l'élimination des cellules graisseuses se font naturellement par le biais du système lymphatique après environ 10 à 12 semaines du traitement. Etant donné que le tissu environnant par rapport au tissu non-adipeux répond à une application au froid, le traitement est considéré comme sûr et doux, et surtout une méthode non-invasive.

Pour éviter d'endommager la peau, un lingette spéciale sur la zone de traitement sera placée pendant le traitement.

## Réussite du traitement:



avant le traitement



avant le traitement




8 semaines après le traitement



8 semaines après le traitement

## Zones de traitement:

- ventre
- hanches
- taille
- dos
- graisse pectoral mâle
- cuisse (intérieure et extérieure)
- haut du bras
- fesses

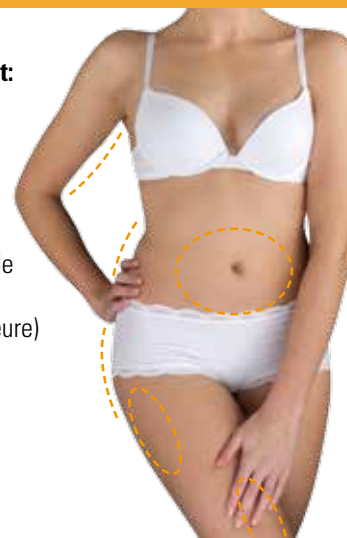

# Z Lipo - Du froid pour une silhouette de rêve





### **ZLipo, la dernière technologie alliée à une conception moderne**

Comme on peut s'y attendre d'un leader mondial de la thérapie à air froid, le ZLipo est à l'avant-garde de la recherche et de la technologie.

Une haute fonctionnalité et une conception moderne répondent à toutes les exigences d'une pratique novatrice.

Deux porte-pièces à main à l'extérieur de l'appareil permettent de stocker les pièces à main à portée de main. En outre, il existe des accessoires, etc. à monter sur le dessus de l'appareil.

La conception légère rend facile le traitement de toutes les zones pertinentes.

### **Facile et rapide, tendant vers le succès**

Le logiciel médical moderne du ZLipo de Zimmer MedizinSysteme offre toutes les possibilités pour un traitement simple et individuel.

Le grand écran couleur tactile de 10,2" permet un ajustement du temps d'application de l'utilisateur, un niveau de vide, un mode de vide (pulsé continu ou) fiable et intuitif. Les paramètres sélectionnés sont affichés clairement au cours du traitement sur l'écran. En plus des paramètres par défaut, il est possible d'effectuer le traitement avec ses propres programmes.

Une température réglable individuellement, un vide constant ou pulsé - avec le ZLipo, tout est possible.






# Z Lipo - Conception et fonctionnalité



## Z Lipo - Les faits marquants

- Conception de l'équipement moderne
- Faible coût par traitement
- Utilisation simultanée de deux applicateurs
- Logiciel convivial à réglage individuel
- Écran couleur tactile de 10,2"
- Plage de température réglable de 5 ° C à -10 ° C
- Vide constant ou pulsé réglable
- Dix niveaux de vide sélectionnables
- Trois cycles de traitement dans une application avec des paramètres de périphériques différents possibles
- Temps de traitement sélectionnable (max 60 min.)
- Démarrage du traitement sur les applicateurs.

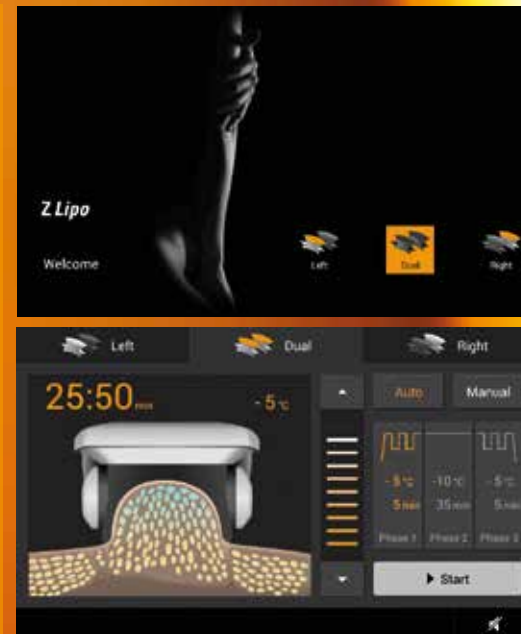

# Z Lipo & Z Wave<sup>Pro</sup> - la combinaison fraîche

## Augmentez votre réussite

Avec la combinaison du Z Lipo et du Z Wave<sup>Pro</sup> (Cryolipolysis<sup>TM</sup> et l'onde de choc) nous offrons la combinaison parfaite pour mieux traiter et obtenir une nette réduction de la graisse.

Des études et des rapports ont montré que le traitement intensif indolore par onde de choc avec le Cryolipolysis<sup>TM</sup> non seulement assure une meilleure perte de graisse, mais stimule aussi le drainage lymphatique et augmente le resserrement de la peau.


## Deux systèmes - un concept

Les clients sont de plus en plus critiques et vous informent avant les traitements. Pour cette raison, il est de plus en plus important pour les pratiques modernes, d'avoir non seulement des traitements individuels, mais des concepts de traitement à offrir. Avec le concept Z Lipo et Z Wave<sup>Pro</sup>, il est possible de gagner de nouveaux groupes de patients.

Les principaux utilisateurs du monde comptent depuis longtemps sur ce concept.



## Cryolipolysis<sup>TM</sup> vs. Cryolipolysis<sup>TM</sup> et ZWave

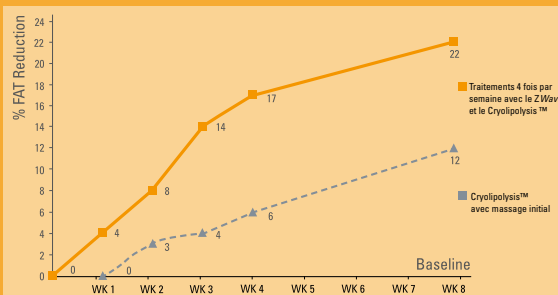

Study by: Jeffrey A. Hunt

## Différence significative entre le massage à la main vs. le ZWave<sup>Pro</sup>



Crédit-photo du Dr. John Shieh, South Pasadena, CA

## Flexible pour votre pratique

Le ZWave<sup>Pro</sup> est également une réussite en tant que dispositif autonome, par exemple pour le traitement de la cellulite, du tissu conjonctif, et utilisé plus généralement chez soi.

Dans le traitement combiné, le ZWave<sup>Pro</sup> et le Cryolipolysis<sup>TM</sup> utilisent avec succès la radiofréquence, les ultrasons et les lasers doux. De bons résultats sont obtenus également dans le traitement des cicatrices.





# Caractéristiques techniques



Technologie	unité de refroidissement avec la technologie des coussinets froids
Programme	programmes libres réglables ou programmes standards
Contrôleur	écran tactile couleur de 10,2"
Applicateurs	applicateurs disponibles pour la taille S, M et L
Sous vide	à environ 333 hPa, 10 niveaux de vide
Connexion	USB de mise à jour pour le service et la mise à jour
Tension	100 V / 220 - 240 V, 50/60 Hz Conforme à la directive basse tension 2006/95 / CE
Classe de protection	I
Dimensions, poids	B 665 mm / 629 mm T / H 1082 mm, environ 84 kg (avec les pièces à main)

