

# WINBACK®

YOUR BODY IS BACK



PHYSIO



SPORT



BEAUTY



INTIMITY

## ET SI VOTRE EXPERTISE ET L'ÉNERGIE WINBACK NE FAISAIENT QU'UN ?

Nous avons la réponse : l'énergie **WINBACK** combine maniabilité et fonctionnalité intuitive. Vous vous concentrez sur votre action et l'énergie vous suit dans vos moindres gestes experts et offre un confort et une souplesse de traitement inégalés.

Le secret de l'énergie **WINBACK** vient de sa capacité à amplifier la puissance de votre massage et d'atteindre des pathologies profondes réputées intouchables.

Les résultats de vos traitements impressionnent vos patients et n'ont pas fini de vous surprendre.

### EXPERTISE



### ÉNERGIE



## RÉÉDUCATION 2X PLUS RAPIDE <sup>(1)</sup>

Offrez à vos patients une rééducation plus rapide, plus confortable et sans douleur.

### ① ÉLIMINER LA DOULEUR

L'énergie **WINBACK** bloque l'information de la douleur pour une durée supérieure à 48 Heures. Votre patient ressent un bien-être et se relâche ; votre massage devient ainsi très performant.

### ② ACCÉLÉRER LA CICATRISER

L'énergie **WINBACK** accélère le système naturel d'autoréparation du corps en favorisant les échanges intra et extra cellulaires d'une manière durable. Les bénéfices de votre traitement se prolongent après la séance.

### ③ LIBÉRER LE MOUVEMENT

L'énergie **WINBACK** libère les tensions (*contractures, œdèmes, fibroses*) en les revascularisant localement. Il vous suffit de 2 minutes sans effort pour lever une contracture en profondeur. L'énergie circule à nouveau dans le tissu lésé et le patient regagne en amplitude.

(1) Résultats deux fois plus rapides sur la rééducation de ceinture de rotation. L'énergie WINBACK provient de la technologie « TECAR », terme utilisé par les études scientifiques depuis 1988. TECAR® Thérapie. Nouvelle technologie de la ceinture de rotation - notre expérience. G. Sanguedolce, C. Viora, R. Castaldo, G. Letizia Mauro - Président de la médecine physique et de la rééducation- Université de Palerme. Sept 2009. Fréquence utilisée 500KHz

## L'ÉNERGIE WINBACK : UN BIO ACCÉLÉRATEUR PHYSIOLOGIQUE

L'énergie **WINBACK** est un courant à Haute Fréquence oscillant entre **300 KHz** et **1 MHz**. Elle accélère « la régénération naturelle » des tissus biologiques. Sa faible intensité en fait une énergie totalement non invasive et 100% naturelle pour le corps humain.

CICATRISATION  
**97%**  
D'EFFICACITÉ <sup>(1)</sup>

L'énergie **WINBACK** provoque un flux d'ions avec des oscillations électriques excessivement rapides au sein de l'environnement cellulaire. Ces oscillations vont entraîner une perméabilisation de la membrane plasmique. Ceci favorise les échanges intra et extra cellulaires et donc la cicatrisation accélérée des tissus.

ANTI DOULEUR  
**81%**  
D'EFFICACITÉ <sup>(2)</sup>

L'énergie **WINBACK** inhibe le message de la douleur pour une durée supérieure à 48 Heures. Ce phénomène s'explique par les oscillations de l'énergie qui vont perturber l'échange classique (*hyperpolarisation, dépolarisation*) du signal de la douleur. L'influx nerveux est donc stoppé et le patient en ressent immédiatement le bénéfice.

CIRCULATION  
**6X**  
PLUS RAPIDE <sup>(3)</sup>

En augmentant l'intensité de l'énergie **WINBACK**, la résistance naturelle des tissus biologiques va transformer l'énergie en chaleur (*diathermie*) qui va recruter les flux circulatoires (*vasculaires et lymphatiques*) pour thermo-réguler la partie ciblée du corps. L'augmentation de la chaleur localisée force la vascularisation de zones peu irriguées (*fibroses, contractures*) et libère ainsi le mouvement.



**1 MHz**  
ACTION SUPERFICIELLE

**500 KHz**  
ACTION SEMI-PROFONDE

**300 KHz**  
ACTION PROFONDE

## LES PLAGES DE FRÉQUENCE WINBACK

**WINBACK** a choisi ses plages de fréquence suite à différentes études dont celle de l'équipe de chercheurs C Gabriel « The dielectric properties of Biological tissues » (4) qui a mis en évidence la perméabilisation des membranes cellulaires en analysant plusieurs types de tissus biologiques. En effet, la polarisation membranaire n'a plus le temps de s'établir au passage de l'énergie **WINBACK**, ce qui facilite les échanges intra et extracellulaires.

Les aspects théoriques et les principales conclusions à ce sujet ont été commentés dans plusieurs études scientifiques : Arsonval 1890, Rudolf Hober 1910, Schwan et Schwan 1957, Foster 1980, Stuchly et Stuchly 1980, Pethig 1984, Pethig et Kell 1987 et Foster et Schwan 1989 - C Gabriel 1996. C'est donc une communauté de chercheurs qui s'est intéressée aux propriétés cellulaires des tissus biologiques et de leur phénomène diélectrique lorsqu'ils sont soumis à des énergies en hautes fréquences. De la plupart de ces études, il en ressort un consensus sur la réaction cellulaire en fonction de la fréquence et du type du tissu biologique.

## LA FRÉQUENCE JOUE SUR LA PROFONDEUR D'ACTION DE L'ÉNERGIE WINBACK.

**Contre-indications :** greffe, pace maker et organes artificiels, grossesse, trouble de la coagulation, insensibilité aux variations thermiques, brûlure, état infectieux, cancer, cartilage de croissance, hypotension, phlébite, insensibilité à la douleur.  
**Principe de précaution :** sur matériel ostéosynthèse (ne pas dépasser 50% de puissance).

(1) En 6 séances, 97% d'efficacité sur les troubles musculaires et articulaires. Évaluation des effets de la multi fréquence en mode d'application capacitive pour les traitements en diathermie. S. Pissini, A. Soldati, F. Spasola, P. Bonifazi, T. Cuccini, M. Scacchetti, A. Menotti, S. Alberti, M. Cognigni, M. Marzavola, A. Garvelli, G. Pivetti, Publication Sport & Medicina, Jan/Feb 2009. Fréquences utilisées 500 KHz, 750 KHz et 1 MHz. (2) Etude Clinique du Transfert Électrique en Hyperthermie pour le traitement de lombago. K. TAKAHASHI, N. TSUZUKI, N. ZHONG-SHI - Département de chirurgie orthopédique « Sakama Medical Center - J. Phys Ther Sci 11: 45-51, 1998. Fréquence utilisée 650 KHz. (3) I.T.C.A.R. Thérapie. Traitement post-opératoire de la fracture du fémur. A. \*ERRANOVA, G. VERMIGLIO, S. ARENA, A. CICCIO, S. DI DIOTI, M. VERMIGLIO - Vol. 44 - Suppl. 1 to No. 3 EUROPA MEDICOPHYSICA - Oct, 2006. Fréquence utilisée 500 KHz.

## ET SI VOUS POUVIEZ CIBLER VOTRE TISSU QUELLE QUE SOIT SA PROFONDEUR ?

Grâce à vos électrodes **CET** et **RET**, vous transférez l'énergie **WINBACK** dans le corps du patient d'une manière localisée ou globale, superficielle ou profonde. Le Transfert d'Énergie (TE) est né de l'association entre le courant à Haute Fréquence et ses électrodes : **CET** and **RET** (CAR), soit **TECAR**.



**TISSU MOU = CET** concentre l'énergie sur les muscles et tous les autres tissus liquidiens. L'action est localisée superficielle ou semi profonde (DEEPCET)

MUSCLE, FASCIA, APONEVROSE, VISCÈRE, LYMPHATIQUE et VASCULAIRE...

**TISSU DUR = RET** concentre l'énergie sur tous les tissus durs tels que les articulations, les tendons et les os. L'action est poly-articulaire et profonde.

LIGAMENT, ARTICULATION, TENDON, PERIOSTE, OS...



## WINBACK S'INSCRIT DANS 125 ANS D'HISTOIRE

**1890** : Découverte de la perméabilité de la membrane plasmique par les courants à haute fréquence à partir de 100 KHz et jusqu'à 10 MHz. Jacques Arsène d'Arsonval, médecin, physicien et inventeur Français.

**1939** : Ouvrage sur la diathermie avec les modes d'applications Capacitive et Résistive traité par William Beaumont, Médecin et physicien anglais sur les premiers équipements de physiothérapie. Fréquence aux environs de 500 KHz.

**1985** : Développement des courants à haute fréquence dans la médecine esthétique avec les électrodes multipolaires pour action sur la peau. Fréquence 1 Mhz.

**1995** : Le courant à haute fréquence se nomme **TECAR** = *Transfert Electrical Capacitive And Resistive* et de nouvelles publications scientifiques sont effectuées en Italie. Fréquence 500 KHz et 650 KHz. L'effet diathermie est privilégié.

**2013** : Lancement **WINBACK** avec plus de 400 installations en moins de 2 ans. Fréquence multiple pour un meilleur ciblage 300 KHz - 500 KHz - 1 MHz. Nouvelle génération de courant plus efficient. L'action de cicatrisation ciblée est privilégiée.

**2016** : 800 cabinets équipés avec 4 nouvelles générations de TECARthérapie.



## L'ESPRIT WINBACK LE RETOUR GAGNANT

**WINBACK** est reconnu par l'élite sportive pour ses vertus thérapeutiques et offre une rééducation rapide pour le patient qui perçoit les bénéfices dès la première séance. **WINBACK** signifie la reconquête et le terme s'emploie souvent pour décrire un athlète de haut niveau qui revient à la compétition après une blessure... Il est l'essence même de l'énergie **WINBACK**... le retour gagnant !

## LE STAFF MEDICAL DES EQUIPES PROFESSIONNELLES

Les valeurs que l'on retrouve dans le haut niveau sont aussi déterminantes pour **WINBACK**. Ce n'est donc pas étonnant que **WINBACK** s'engage dans le domaine sportif. Par exemple, dans le basket, le cyclisme, le judo, la natation, le football, **WINBACK** est aux côtés des commissions médicales de fédérations sportives dans de nombreux pays. **WINBACK** a également remporté de nombreux appels d'offres auprès de grands clubs professionnels prestigieux.

**Fédération** : Royal Belgium Football Association - French Basket Ball Federation - French Judo Federation - French Cycling Federation - Russia fencing federation - Spanish Triathlon Federation - CNEA Font Romeu (CREPS). **Football International** : AL HILAL Ryad (Saoudia Arabia) - BOCA Junior (Argentina) - KV Ostende (Belgium) - LEGIA Warsaw (Poland) - USMA Alger (Algeria). France : FCGB Bordeaux - CNFC Niort - ESTAC Troyes - RC Lens - FC Lorient - OL Lyon - MHSC Montpellier - FC Nantes - OGC Nice - Nîmes Olympique - Paris PSG (Pro, CFA et Féminine) - Paris FC - SRFC Rennes - FC Tours - VAFC Valenciennes. **Basket** : CSJK Moscow - Shark Antibes - OLB Orléans - Chorale de Roanne - Basket Landes. **Rugby** : Stade Toulousain - Oyonnax - Biarritz Olympique - Union Bordeaux - Bègles - USAP Perpignan. **Cyclisme** : AG2R Pro Cyclisme. **Hand Ball** : Paris Hand



**ET SI L'ÉNERGIE WINBACK ÉTAIT 100% COMPATIBLE  
AVEC VOS TRAITEMENTS ?**

**TECAR 1.0 = 1 ELECTRODE MOBILE + 1 ELECTRODE FIXE**



**ELECTRODE MOBILE (CET OU RET)**  
Vous pilotez l'électrode MOBILE afin de découpler l'action de votre massage. Avec l'électrode mobile **CET**, vous agissez sur les tissus mous localement. Avec l'électrode mobile **RET**, vous diffusez l'énergie en profondeur sur les tissus durs.



**ELECTRODE FIXE (PLAQUE DE RETOUR)**  
Votre deuxième électrode est FIXE, elle se met au contact du patient et ferme le circuit électrique avec l'électrode mobile.



Le massage offre toute sa dimension en profondeur. La distance entre les deux électrodes est importante et offre des traitements sur un large segment poly-articulaire comme les membres inférieurs. Le confort du patient est indéniable : installé sur votre table de massage, il se détend et vous laisse toute la latitude pour travailler en profondeur.

**TECAR 1.0 : LES ⊕ WINBACK**



**MyBACK** votre main remplace l'électrode mobile. L'énergie **WINBACK** passe dans le corps du patient au travers de votre main. Totalement non invasif, cette technique offre un touché exceptionnel où vous ressentez directement les effets de l'énergie...comme une contracture qui lâche sous vos mains en quelques secondes. Inoubliable.

**Adhérences sous-quadricipitales** : Votre main d'écoute émet de l'énergie Winback. Vous pourrez ainsi lever rapidement des adhérences tissulaires.




**FLEX** est une électrode FIXE adhésive qui remplace la traditionnelle plaque de retour. FLEX colle à la peau du patient permettant ainsi un traitement plus dynamique (*mobilisation*) ou bien encore de traiter le patient en dehors d'une table de massage. Chaque électrode FLEX est unique à chaque patient pour 5 à 6 traitements. Son hygiène respecte les normes drastiques hospitalières.

**Sollicitation posturale assis** : Un travail actif d'écoute émet de l'énergie Winback. Vous pourrez ainsi lever rapidement des adhérences tissulaires.



## LE PLUS DES INNOVATIONS WINBACK

### TECAR 2.0 = 2 ELECTRODES FIXES

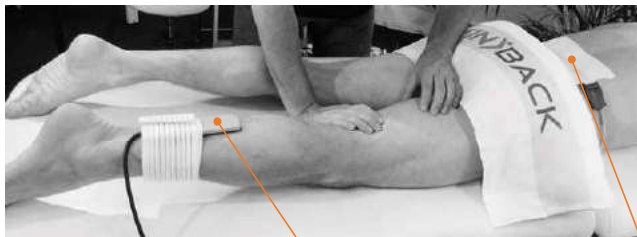

#### ELECTRODE FIXE (CET OU RET)

Vous posez une électrode FIXE CET ou RET sur le patient vous laissant toute liberté d'action avec vos deux mains libres.



#### ELECTRODE FIXE (PLAQUE DE RETOUR)

Comme en **TECAR 1.0**, votre deuxième électrode FIXE se met au contact du patient et ferme le circuit électrique avec l'électrode mobile.

La **TECAR 2.0** est la version « couteau suisse » de l'énergie **WINBACK** où il y a tout simplement tellement de scénarios qu'il nous est impossible de tous les décrire. 3 exemples de traitements types utilisés couramment par vos confrères.

### TRAITEMENT DYNAMIQUE

#### TRAITEMENT ESSUIE-GLACE:

Grâce à un large choix d'électrodes, toutes les techniques actives sont compatibles au mode résistif. Nous pouvons ainsi assouplir efficacement les tissus fibreux de la bandelette de Maisiat par étirement, crochetages, Mtp. Le patient peut aussi effectuer l'ensemble des exercices gymniques de façon autonome.



### TRAITEMENT ASSISTÉ

**WINBACK** élargit ses possibilités dans l'exploitation des électrodes sur le patient. Avec la **TECAR 2.0**, il est dorénavant possible d'appliquer deux électrodes fixes sur le patient, dont l'une remplace la plaque de retour. Ces électrodes émettent alors alternativement l'énergie. Quand l'une émet, l'autre reçoit. Cela permet de diffuser une énergie homogène.

Traitement autonome en 10 / 15 min. Avec ses fonctions low pulse et sa gestion dynamique des fréquences, Winback offre une application autonome pour lever toutes les tensions du patient.

L'application du courant au travers des électrodes fixes est localisée sur les zones à traiter pour une durée de 10 à 15 minutes. Ce nouveau principe permet d'optimiser et de développer de nouveaux protocoles.




### TRAITEMENT EXPERT

#### CERVICALGIE :

Inégit, l'énergie **WINBACK** est délivrée par la main du thérapeute. Pour un abord délicat comme les cervicales, vos deux mains sont libres pour adapter toutes vos techniques manuelles de mobilisation vertébrales. Vous voulez encore plus de maniabilité en **MyBACK** alors cette configuration est faite pour vous.



## TECAR 3.0 = 2 ELECTRODES MOBILES

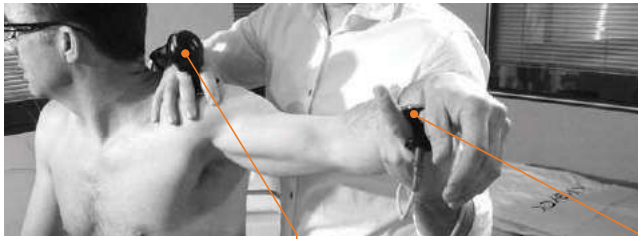

**ELECTRODE MOBILE (CET OU RET)**  
CET, vous agissez sur les tissus mous localement.  
RET, vous diffusez l'énergie en profondeur sur les tissus durs.



**ELECTRODE MOBILE (PLAQUE DE RETOUR)**  
La deuxième électrode remplace l'électrode FIXE de **TECAR 1.0** pour une gestion de l'énergie entre vos mains.

Passer en mode expert avec une énergie concentrée et dynamique. Chaque électrode émet alternativement l'énergie **WINBACK** vous offrant un traitement focalisé et très rapide (*moins de 10 minutes*) sur une articulation ou sur une partie du corps très ciblée.  
La gestion électronique de l'énergie **WINBACK** vous permet d'atteindre des pathologies intouchables sans difficulté.

### CONFLIT MÉCANIQUE DE L'ÉPAULE :

Vous travaillez avec deux électrodes actives. L'énergie **WINBACK** est émise entre vos deux mains. Cette application est notamment très efficace pour aborder des articulations dites complexes comme l'épaule. Cette mobilité de l'énergie permet d'aborder une lésion sous tous les plans. Ainsi tous les axes de mouvements de l'épaule seront atteints en quelques minutes avec un confort inégalé. Votre expertise s'exprimera dans toutes les dimensions.  
Enfin, l'installation du patient est des plus rapides, ne passez plus à côté d'une séance **WINBACK** !



## TRAITEMENT EXPERT



La technologie **WINBACK** permet aux thérapeutes de bénéficier d'une mobilité complète des mouvements et de proposer un traitement plus rapide au patient.



La **TECARTHÉRAPIE** permet au thérapeute d'associer une technologie de courant à haute fréquence apportant une stimulation cellulaire avec son expertise manuelle.

Ainsi, le praticien n'a pas besoin d'un outil préprogrammé comme proposé mais plutôt d'une technologie intuitive s'adaptant à ses propres méthodes de travail.

**WINBACK** présente des innovations pour accélérer les séances de thérapie manuelle. Ces nouvelles technologies exclusives à **WINBACK**, permettent d'atteindre l'ensemble des tissus lésés dans un temps record.


## TECAR 4.0 = 1 ELECTRODE MOBILE (MIX)



TECAR 4.0 de WINBACK repose sur la technologie de haute fréquence MIX où les deux électrodes au contact du patient sont regroupées en 1 seule. MIX offre une énergie concentrée et superficielle avec une réaction tissulaire immédiate.


TECAR 4.0 Les deux électrodes ont été intégrées dans une seule électrode afin de concentrer l'énergie sur de petites zones du corps sans pour autant nécessiter beaucoup de puissance. Avec 3 ou 6 pôles, ce mode se présente avec des pôles émetteurs / récepteurs dans l'électrode qui sont sollicités par couple avec un algorithme très élaboré.

Ce mode offre une électrode manuelle avec plusieurs pôles dynamiques qui passent successivement en émission ou réception. La quantité d'énergie est optimale pour une stimulation cellulaire sur une surface de quelques centimètres.

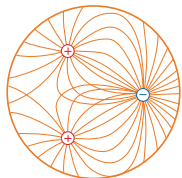

LE MIX3 OU TRIPOLAIRE (BODY & FOCUS).

MIX3 offre une électrode main avec 3 pôles dynamiques qui passent successivement en émission ou réception de courant. Deux pôles sur 3 sont actifs simultanément. Il existe deux tailles de MIX3: Body et Focus suivant la taille de la zone à traiter ou de la fragilité de son épiderme. MIX3 est dédié aux couches superficielles des tissus. Le mode MIX3 développe une fréquence inédite de 1MHz et particulièrement adaptée à la stimulation très superficielle.

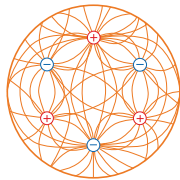

LE MIX6 OU HEXAPOLAIRE (BODY).

MIX6 se présente avec 6 émetteurs / récepteurs dans l'électrode qui sont sollicités par couple avec un algorithme très élaboré. Le MIX6 est la solution des zones cutanées plus profondes et focalisées. Sans plaque de retour classique, le mode multipolaire permet à lui seul une stimulation ganglionnaire localisée et superficielle adaptée aux tissus lymphatiques. Ce focus ganglionnaire accélère considérablement la chasse du liquide lymphatique.

## TRAITEMENT FOCUS ET RAPIDE

# 6X

PLUS RAPIDE

Les études scientifiques ont démontré que la technologie MIX stimule en moins de 30 secondes les tissus en y apportant les mêmes effets vasculaires, antalgiques et cicatriciels qu'un traitement classique TECAR 1.0 de 3 minutes.

# 3X

MOINS D'ÉNERGIE

L'autre atout de la technologie MIX est son incroyable rendement d'énergie concentrée, ce qui lui permet un traitement équivalent à une TECAR 1.0 avec 3 fois moins d'énergie.



### Exemple de pathologies.

Pour certaines pathologies localisées, il est nécessaire d'avoir un surcroît d'énergie focalisée pour traiter : des aponévroses, des adhérences de cicatrices ou bien encore des tendinopathies superficielles, les troubles lymphatiques (sans compression), Maladie de Dupuytren, Traitement post opératoire de la main et du pied, périostite tibiale et les imperfections esthétiques.



## ET SI L'INTELLIGENCE DE L'ÉNERGIE WINBACK VOUS FACILITAIT LA VIE ?

L'énergie WINBACK possède des fonctionnalités permettant de rendre encore plus efficace votre traitement. Avec moins d'énergie, vous obtenez des résultats efficaces, durables avec plus de confort pour vos patients. Alors pourquoi vous en priver ?

### CIBLAGE TISSULAIRE

#### DEEPCET

Il existe un deuxième niveau de profondeur en CET, le semi-profond DEEPCET qui permet une élimination plus rapide des tensions en profondeur tout en évitant la surchauffe de l'épiderme ce qui améliore grandement le confort du patient. Les résultats montrent une action plus rapide dans l'élimination de tensions (*contractures et fibroses*) avec une énergie deux fois moins puissante.

#### RET +

WINBACK a mis au point une fréquence unique où l'énergie est concentrée dans le corps du patient et non plus dans la main du thérapeute en MYBACK (*la main du thérapeute remplace l'électrode MOBILE*). RET+ offre ainsi un transfert d'énergie optimisée sans échauffement pour la main du thérapeute.

### FOCUS DIATHERMIE

#### LOW PULSE

Augmente l'efficacité de l'énergie WINBACK au profit de l'efficacité. Cette fonction est très appréciée pour le travail sur les inflammations et sur des ganglions lymphatiques ou bien encore pour le retour au calme après une action en hyperthermie.

#### SUPER PULSE

Augmente l'efficacité de l'énergie WINBACK au profit de l'efficacité. Cette fonction favorise la puissance pour forcer des zones récalcitrantes (*fibroses, contractures*) à se revasculariser. Son effet « coup de bottin » élimine rapidement les tensions et il est important d'associer un programme de drainage pour évacuer l'excès de fluide sur la zone.

#### BOOST

Privilège un traitement sans assistance et sans efficacité. Le rapport couple / puissance est très performant. BOOST requiert une certaine expérience dans les traitements en TECARTHERAPIE.

### FRÉQUENCE DYNAMIQUE

#### DYNAMIQUE

Balaye automatiquement toutes les couches tissulaires afin d'éliminer les tensions sur les tissus superficiels et profonds. La fréquence de l'énergie change automatiquement sans votre intervention.

#### SWAP

SWAP combine alternativement l'émission des électrodes CET (*Capacitif*) et RET (*Résistif*) pendant une séance. Il est désormais possible d'appliquer les électrodes CET & RET sur le patient. La fonction SWAP répartit l'énergie entre ces deux électrodes. SWAP offre ainsi une action poly-tissulaire sur tous les types de tissus.

### DOUBLE ACTION

#### LOW BEAT

Est un signal couplé à l'énergie TECAR qui active les fibres nerveuses dans le but de générer des secousses musculaires élémentaires. Ce double effet accélère la levée des tensions (*contractures, fibroses*) et stimule la circulation (*vascularisation et drainage*). L'intelligence de ce nouveau couple TECAR-BEAT offre un rendement de puissance inégalé sans favoriser l'hyperthermie.

#### SUPER BEAT

Est un signal deux fois plus rapide que le LOW BEAT pour un traitement sur des zones superficielles. Le SUPER BEAT comme le LOW BEAT fonctionne exclusivement en mode RET+.





## L'ACADEMIE WINBACK ET SI VOUS ÉTIEZ CONNECTÉ AVEC UNE EXPERTISE PARTAGÉE ?

C'est l'engagement de l'académie **WINBACK** ; celui de partager sa connaissance avec vous et vos confrères dans le monde entier. Ses formations, ses forums, ses réseaux sociaux vous sont accessibles. Vous pourrez ainsi échanger, apprendre, témoigner sur l'énergie **WINBACK** avec vos confrères déjà équipés.

3 niveaux de formation sont également disponibles pour parfaire votre connaissance.

**My START** permet de comprendre l'énergie **WINBACK** et comment l'exploiter avec vos propres techniques. Toutes les innovations sont présentées de manière à ce que vous puissiez vous projeter dans vos traitements.

**My PRACTICE** couvre l'ensemble des applications de l'énergie **WINBACK**. La « formation pratique » vous place dans une situation de travail, face à des pathologies courantes, que vous traitez dans votre cabinet. Cette formation vous permet de découvrir de nouveaux domaines thérapeutiques dans la rééducation, la santé, le sport et la beauté.

**My EXPERT** développe les techniques propres à un domaine d'application vu par un expert. Cette formation vous est accessible après une bonne expérience dans la gestion de l'énergie **WINBACK** et prend en compte des protocoles intégrant d'autres technologies ou méthode manuelles.



*J'ai découvert l'énergie WINBACK et j'en ai apprécié rapidement les bienfaits tant pour les patients qui sentent rapidement un mieux que pour mon égo qui se satisfait enfin d'une énergie obtenant des résultats sur des problèmes persistants.*

**Pierre Blanc,**  
Kinésithérapeute

*Je souhaitais m'investir dans une nouvelle thérapie efficace et performante! C'est aujourd'hui chose faite avec l'énergie Winback qui a modifié de façon considérable ma façon de travailler au quotidien!*

**Johan Quintard,**  
Kinésithérapeute

*Les bénéfices de l'énergie WINBACK sont là, c'est une évidence, et mes patients me le rendent bien... Je reçois même des prescriptions de médecins pour un traitement WINBACK.*

**Alexandre Dauguet,**  
Kinésithérapeute



## MOBILISATION DE LA SCAPULA

L'objectif est de lever des contractures du trapèze moyen et de gagner en mobilité de la scapula.


En **TECAR 2.0**, le thérapeute travaille avec ses deux mains comme le décollement d'adhérences et la stimulation co-contraction rotateur et des fixateurs.



## APPLICATION DE L'ÉNERGIE WINBACK SUIVEZ VOTRE INTUITION, L'ÉNERGIE WINBACK S'ADAPTERA À VOTRE GESTE.


C'est à l'énergie **WINBACK** de s'adapter à vos besoins et à vos attentes, et non l'inverse. C'est pourquoi **WINBACK** vous offre le choix de sélectionner différentes méthodes d'applications **TECAR** de son énergie : **intuitive, polyvalente, flexible et compatible.**

C'est le fruit d'une collaboration étroite avec vos confrères. Nous avons ainsi étudié votre expertise manuelle, vos domaines d'expertises, vos équipements et vos temps de traitement.

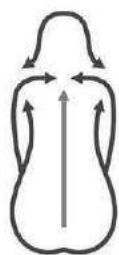

### INTUITIVE AVEC VOS EXPERTISES

Ne changez pas votre manière de travailler, l'énergie **WINBACK** renforce votre efficacité manuelle. Toutes techniques de massage connues, thérapie manuelle, structurale, ostéopathie, techniques vertébrales, thérapie manuelle viscérale, fascia thérapie, médecine chinoise, ventouses, reboutement, crochetage, massages cicatriciels, drainage lymphatique manuel, posturologie, trigger points, Mézières, chaînes musculaires.

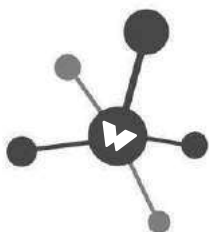

### COMPATIBLE AVEC VOS TRAITEMENTS

Associez vos autres équipements avant, pendant et après vos traitements. **WINBACK** adapte son énergie avec des équipements : électrothérapie, cryothérapie, presso thérapie, thérapie par vibration, palper rouler mécanique, chromothérapie, coussin proprioceptif, plateau de Freeman, sangles travail poids de corps, bandes élastiques, ballon de gymnastique, taping.



### FLEXIBLE AVEC VOS SÉANCES

Optimisez votre temps de travail, l'énergie **WINBACK** vous offre le protocole et la configuration **TECAR** idéale. Votre temps est précieux et votre agenda est constamment bousculé par des événements. Vous devez réagir tout en assurant un traitement efficace et de qualité. En 1 min, vous positionnez les électrodes pour un traitement assisté et automatique. Ou bien encore, vous pouvez également concentrer l'énergie localement pendant 4 minutes.



PHYSIO



SPORT



BEAUTY



INTIMTY

### POLYVALENTE AVEC VOS BESOINS

Utilisez l'énergie **WINBACK** dans tous vos domaines d'application en vous appuyant sur des protocoles efficaces et éprouvés : Physio, Sport, Beauty et Intimty





NOS UNIVERS 

PHYSIO - SPORT - BEAUTY - INTIMITY

# WINBACK®

PHYSIO

L'énergie **WINBACK** est compatible à toutes les pathologies chroniques et aiguës. Dans ce domaine, le traitement donne des résultats visibles dès la première séance (*gain d'amplitude, antalgie, revascularisation*). Le retour biologique optimise le processus cicatriciel tout en limitant les fibroses.

#### INDICATIONS

*Antalgique et anti-inflammatoire, rupture du cercle vicieux douleur/inflammation/raideur, libération des amplitudes articulaires, action fibrolytique, diminution de l'œdème, drainage de l'épanchement hémorragique, amélioration du processus de cicatrisation.*

#### RHUMATOLOGIE

Syndromes arthrosiques : antalgie, drainage profond de l'œdème, libération des amplitudes. Tendinopathies chroniques, épicondylalgie, cervicalgie, lombalgie commune aiguë et chronique, capsulites, raideurs articulaires.

#### DOULEUR


L'élimination rapide de la douleur est décisive pour une rééducation plus efficace. Le thérapeute peut alors commencer ses traitements avec une action plus rapide et plus profonde. L'antalgie s'installe avec un effet durable supérieur à 48 heures.


#### DRAINAGE LYMPHATIQUE

L'énergie **WINBACK** optimise les manœuvres d'aspiration, de poussée et de résorption et accélère les techniques manuelles du **Drainage Lymphatique**. Bien que les effets soient immédiats, le traitement se concentre sur l'effet mécanique, c'est à dire l'évacuation rapide et efficace de l'excès de fluide.

Durée : 10 à 25 minutes - Nombre : 3 à 7 séances  
Fréquence : 1 par semaine - Intense : 3 par semaine

*Guy Everts, masseur kinésithérapeute belge : « Depuis 5 mois, je soigne un groupe de 10 patients atteints de fibromyalgie par WINBACK Thérapie. Aujourd'hui : 4 patients sur 10 ne sont plus que toutes les 6 semaines, 4 patients toutes les mois et 2 patients toutes les 2 semaines. Mes patients se sentent généralement moins fatiguées et plus forts mentalement. »*

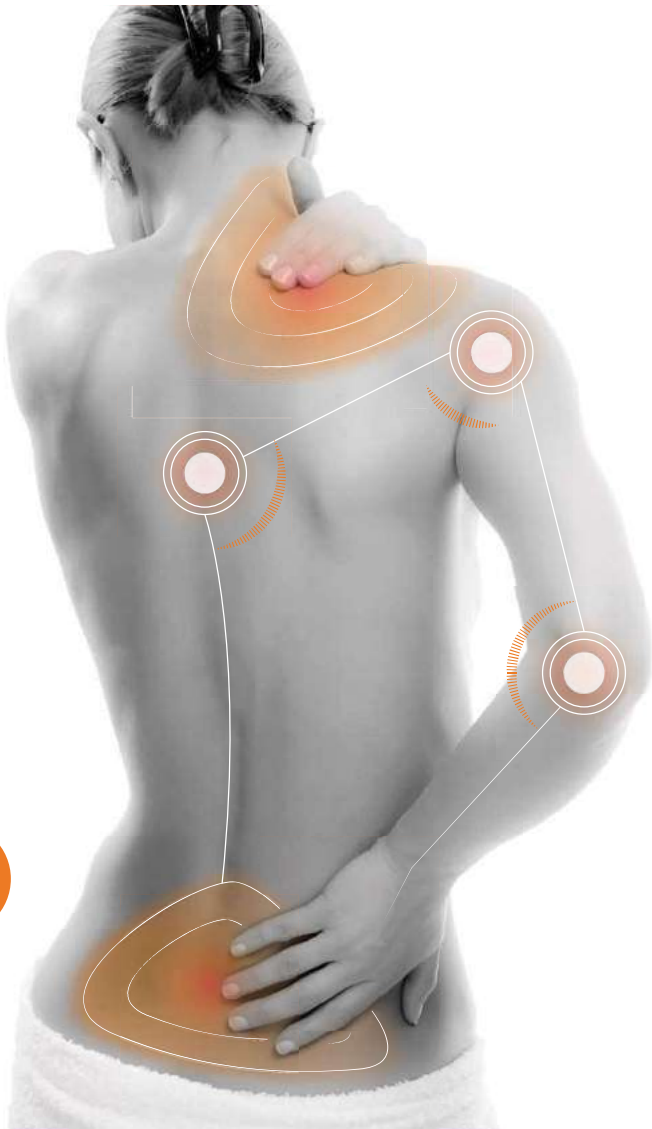

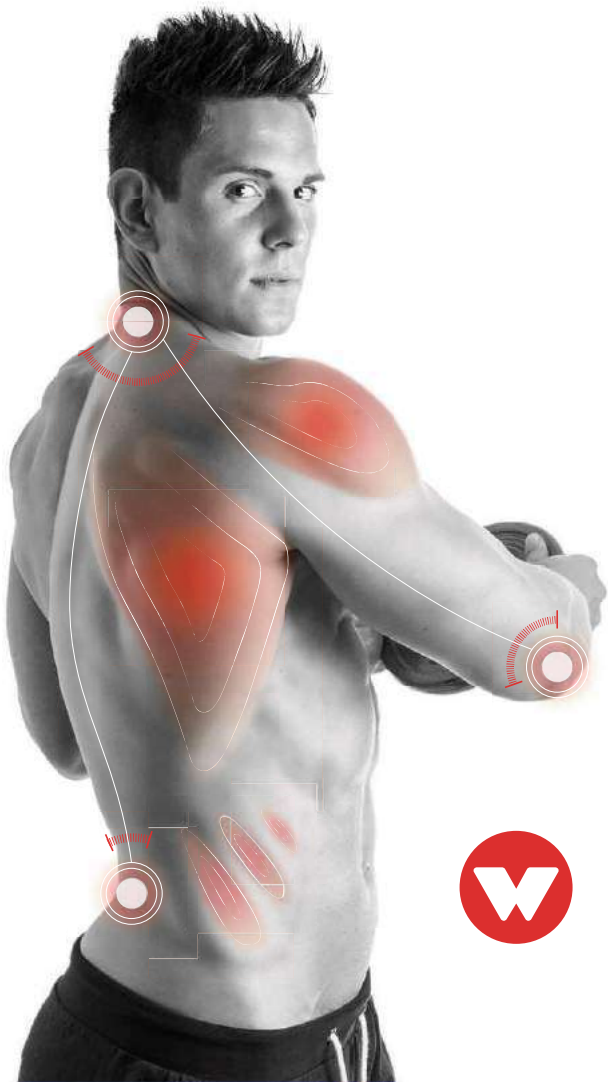

# WINBACK®

## S P O R T

**WINBACK SPORT** offre une gamme complète de soins prodigués par des professionnels de santé qualifiés dans un environnement convivial. Le sportif bénéficie d'une prise en charge exclusive et personnalisée.

### TRAUMATOLOGIE

**WINBACK SPORT** répond aux soins d'urgence de blessures musculo-squelettiques aigus. L'énergie **WINBACK** allée à une prise en charge immédiate réduit l'ampleur du traumatisme et offre au sportif un retour à son activité physique **plus rapidement** et **plus efficacement**. Les traumatismes entraînent des contusions et sont traités immédiatement pour restructurer le tissu abimé et stopper le processus inflammatoire. En phase préopératoire les épanchements et les oedèmes sont réduits pour faciliter ainsi l'intervention chirurgicale. En phase postopératoire, les complications thérapeutiques sont résorbées.

#### INDICATIONS

*Entorses, déchirures musculaires, fractures, pré et post-opératoire sur ligamentoplasties, prothèses et ostéosynthèses. Post-traumatique aigüe (J1-J3 utilisation en non-thermique exclusivement) : antalgique et anti-inflammatoire, anti-oedémateux. Post-traumatique chronique ou séquellaire : action fibrolytique.*

### RÉCUPÉRATION

Après une compétition, un massage profond avec l'énergie **WINBACK** détend efficacement les muscles qui ont été mis à rude épreuve par l'effort intensif. Ces gestes stimulants et relaxants remettent en fonction la structure biomécanique plus rapidement tout en redonnant une tonicité au muscle. *Contracture musculaire, courbatures, lésions musculaires récentes et anciennes : élongations, déchirures, claquages, contusions musculaires.*

### PRÉVENTION

La mission du kinésithérapeute du sport est d'identifier les faiblesses des fonctions biomécaniques du patient. Il y associe un programme de renforcement et de rééducation pour prévenir tout type de blessures. Il va ensuite corriger la posture du sportif afin d'éviter le mauvais geste initiateur de la faiblesse.



*« Je suis Cheick Kongo, vétéran de l'UFC et Bellator poids lourds combattant de MMA. Je souhaite attirer votre attention sur WINBACK Sport, un dispositif qui a beaucoup influencé ma propre rééducation et ma capacité à rester au plus haut niveau. »*



## WINBACK®

### BEAUTY

Parce que la beauté n'est pas à prendre à la légère, WINBACK a développé des traitements prodigués par des experts en massage et en physiothérapie, les kinésithérapeutes. Leur compréhension du corps et les imbrications complexes des systèmes tissulaires, circulatoires et neurologiques en font des experts capables de traiter en profondeur et durablement les imperfections du corps. La synergie entre les professionnels de santé et les innovations WINBACK apportent une réponse efficace, rapide et durable pour des pathologies jusque-là considérées comme rebelles. Par exemple, comme la cellulite fibreuse, les amas adipeux localisés, la ptose abdominale.

#### ELIMINER & DESTOCKER

L'offre WINBACK permet également de remodeler des zones difficiles comme le ventre, la culotte de cheval ou bien encore la cellulite fibreuse.

Réduction de tout type de cellulites, des amas graisseux et de la rétention d'eau. WINBACK a une action directe de réduction des imperfections dans les zones de stockage (ventre, hanche, cuisse) en agissant par effet diathermique et circulaire. La diminution du volume réduit la pression sur l'hypoderme et l'effet peau d'orange. WINBACK est donc une réponse idéale pour l'amaigrissement et l'élimination des imperfections en profondeur.

**Exemple Physiopathologie :** Cellulite fibreuse. Action antalgique puis levée des adhérences avec une hyperthermie localisée. **Technique :** Massage doux puis pétrissage en TECAR 3.0 (DUAL ACTIVE) pour un traitement focalisé afin de libérer les tensions.

**Exemple Physiopathologie :** Amas adipeux localisé. Activation cellulaire - Diathermie. **Technique :** Stimuli réflexe et lymphatique. Massage en profondeur en TECAR 1.0 pour stimulation locale et déclencher un processus de déstockage à distance de la zone.

#### TONIFIER & GAINER

L'énergie WINBACK régénère et revitalise toutes les couches du derme en stimulant en profondeur les ressources naturelles du corps. Le visage retrouve ainsi un éclat naturel remarquable dès la première séance.

Régénération de l'épiderme et gommage des imperfections. L'énergie WINBACK stimule les fibroblastes et favorise la production de collagène et d'élastine, pour un effet tenseur. L'action profonde des têtes MIX concentre l'énergie sur les couches de la peau.

**Exemple Physiopathologie :** Ptose abdominale. Activation cellulaire (viscérale et musculaire). Mobilisation manuelle en combinant avec exercices physio ou équipement de renfort musculaire. Utilisation de la TECAR 2.0 (DUAL PASSIVE).

**Exemple Physiopathologie :** Relâchement cutané. Réactivation du fibroblaste et recrutement micro capillaire. Application localisée avec un léger massage corporel/facial en TECAR 4.0 pour atteindre toutes les couches de la peau.

A chaque pathologie, WINBACK apporte une réponse adéquate en fonction de votre expertise, de votre façon de travailler, de votre temps de traitement et bien sûr du bilan physiologique du patient.



## WINBACK®

### INTIMITY

L'approche thérapeutique des algies pelvi-périnéales se veut avant tout pluridisciplinaire. Cependant, la thérapie manuelle est une des solutions que peut proposer le kinésithérapeute pour soulager ses patients souffrant de douleurs périnéales diverses.

**WINBACK**, fort de son expérience, propose au travers de ses innovations un complément technologique **TECAR** à l'expertise manuelle du thérapeute formé. En effet, l'énergie délivrée par **WINBACK** permet une antalgie plus rapide pendant et après la séance, une vascularisation ciblée, une détente musculaire, une levée d'adhérences péri-tissulaire.

#### L'APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DES ALGIES PELVI-PÉRINÉALES

Le thérapeute bénéficie d'électrodes spécialement étudiées pour lui permettre un geste technique libre et intuitif. Ainsi, pour une approche intra cavitaire du plancher pelvien par exemple, **WINBACK** opte pour la **TECAR 2.0** par ajustement d'électrodes résistives externes ; permettant un geste manuel interne maîtrisé et confortable.

Pour lutter contre l'œdème et l'état congestif pelvien souvent associés, **WINBACK** dispose d'un mode Capacitif dynamique pouvant atteindre et sélectionner les différents tissus mous quel que soit la profondeur. Les manœuvres abdominales pour réduire la ptose viscérale, stimuler les fonctions viscérales, mobiliser les suspensions ligamentaires seront facilitées par l'utilisation de deux électrodes mobiles en **TECAR 3.0**. Les dernières évolutions **WINBACK** répondent aux exigences thérapeutiques pour lutter contre les douleurs pelviennes.

#### LE TRAITEMENT POST OPÉRATOIRE DU CANCER DU SEIN.

Un traitement post-opératoire du cancer du sein a été développé afin de proposer une solution physiologique et esthétique permettant aux patientes de soulager les symptômes du lymphoedème. Les exercices de drainage et d'étirement du bras et de l'épaule, réalisés au cours des séances de Tecarthérapie **WINBACK**, soulagent significativement les douleurs du lymphoedème. Un traitement de drainage lymphatique manuel est alors réalisé pour stimuler la circulation de la lymphe.

Avec ce traitement, **WINBACK** s'investit personnellement dans l'accompagnement de la femme victime du cancer du sein. L'objectif de ce traitement est de proposer aux femmes un traitement à la fois physiologique et esthétique, lui permettant de soulager ses douleurs et retrouver confiance en elle.

*Catherine, médecin et patiente « J'ai débuté très rapidement les séances de rééducation après mon ablation totale du sein gauche (J+10) et de plusieurs ganglions lymphatiques. Les soins avec la Winback m'apportent un véritable soulagement ; ils m'ont permis de retrouver une totale mobilité de l'épaule et une libération des cordelettes lymphatiques étant à l'origine de mes douleurs et d'une sensation de lourdeur du membre supérieur gauche. Ces soins sont très agréables et se font deux fois par semaines et sont d'une grande aide »*





## BACK 1S

**LE PLUS DE LA BACK 1S**  
**L'énergie Winback avec le poids en moins**

La **BACK 1S** offre tous les bénéfices de la technologie **WINBACK** avec un poids minimum pour un maximum d'efficacité ! Ses 4 kilos lui permettent de suivre un thérapeute dans tous ses déplacements sans encombre. Sa valise a été spécialement étudiée pour ces effets.

Domaines d'application : **PHYSIO - SPORT.**

### CARACTÉRISTIQUES

**Puissance :** CET 400 VA - RET 100 Watts  
**Fréquence :** 500 KHz & 300 KHz  
**Fonction :** DYNAMIC - LOW PULSE  
 SUPER PULSE - BOOST

**Formation :** MyPRACTICE

**Poids :** 4 kg.

Valise de Transport en option

### LIVRÉE EN TECAR 1.0

**MOBILE CET / DEEPCET :** 2 électrodes de tailles différentes pour action focus ou radiale

**MOBILE RET :** 2 électrodes de tailles différentes pour les petites et les grandes surfaces

**FIXE :** Plaque de retour et 10 plaques adhésives FLEX

**OPTIONS DISPONIBLES**

**TECAR 2.0 :** 1 FIXE CET / 1 FIXE RET

(électrodes rectangulaires - FIX PAD)

**TECAR 3.0 :** électrode MOBILE

(de retour)

Garantie 2 ans équipement - 1 an accessoires.  
 Fabriqué sous normes ISO9001 - ISO14385 - KIVA 1994.  
 Normes : CE MEDICAL.





### LE PLUS DE LA SÉRIE BACK 3

La synergie entre la performance et l'efficacité

La **BACK 3** se déplace facilement d'une pièce à l'autre dans un cabinet. Son porte accessoires et son chariot offre la configuration idéale pour partager l'équipement entre collaborateurs. Largement déployée, la **BACK 3** est l'équipement le plus plébiscité de la gamme **WINBACK**. L'autre atout de la **BACK 3** est sa capacité à évoluer d'une configuration **BACK 3S** à une **BACK 3SE** ou de futures innovations.

## BACK 3S

Domaines d'application : PHYSIO - SPORT.

#### CARACTÉRISTIQUES

Puissance : CET 400 VA - RET 100 Watts  
 Fréquence : 500 Khz & 300 Khz  
 Fonction : DYNAMIC - LOW PULSE  
 SUPER PULSE - BOOST  
 SWAP - BEAT - RET +

Formation : MyPRACTICE  
 Chariot & porte accessoires

**LIVRÉE EN TECAR 1.0**  
**MOBILE CET / DEEPCET** : 3 électrodes de tailles différentes pour action focus ou radiale  
**MOBILE RET** : 3 électrodes de tailles différentes pour les petites et les grandes surfaces  
**FIXE** : Plaque de retour et 10 plaques adhésives FLEX

**OPTIONS DISPONIBLES**  
**TECAR 2.0** : 1 FIX CET / 1 FIX RET (électrodes rectangulaires - FIX PAD)  
**TECAR 3.0** : électrode MOBILE (de retour)

Garantie 2 ans équipement - 1 an accessoires.  
 Fabriqué sous normes ISO9001 - ISO14385 - KIWA 1984.  
 Normes : CE MEDICAL

## BACK 3SE

Domaines d'application : PHYSIO - SPORT - BEAUTY

#### CARACTÉRISTIQUES

Puissance : CET 400 VA - RET 100 Watts  
 Fréquence : 1 Mhz, 500 Khz & 300 Khz  
 Fonction : DYNAMIC - LOW PULSE  
 SUPER PULSE - BOOST  
 SWAP - BEAT - RET +

Formation : MyPRACTICE - MyBEAUTY  
 Chariot & porte accessoires

**LIVRÉE EN TECAR 1.0**  
**MOBILE CET / DEEPCET** : 3 électrodes de tailles différentes pour action focus ou radiale  
**MOBILE RET** : 3 électrodes de tailles différentes pour les petites et les grandes surfaces  
**FIXE** : Plaque de retour et 10 plaques adhésives FLEX

**LIVRÉE EN TECAR 4.0**  
**MIX3 (Body) - MIX6 (Body) - MIX3 (Face)**

**OPTIONS DISPONIBLES**  
**TECAR 2.0** : 1 FIX CET / 1 FIX RET (électrodes rectangulaires - FIX PAD)  
**TECAR 3.0** : électrode MOBILE (de retour)

Garantie 2 ans équipement - 1 an accessoires.  
 Fabriqué sous normes ISO9001 - ISO14385 - KIWA 1984.  
 Normes : CE MEDICAL



P H Y S I O



S P O R T



B E A U T Y



I N T I M I T Y



Impression & Design - www.winback.com - version Mars 2016

**WINBACK**

885 Av du Docteur Lefebvre, Twins 2  
06270 Villeneuve Loubet - France

**T. +33 (0)4 93 08 85 81**

contact@winback.com  
[www.winback.com](http://www.winback.com)

